

Sähköinen Mustapäiden Poistaja, Huokosten limurointi



Tiedot:

- Materiaali: ABS
- Syöttöteho: 2,5W
- Imu: jopa 62 kPa

- Akku: 6000 mAh
- Käyttöjännite: 5V
- Latausjännite: 5V
- Käyttöaika: noin 90 min
- Virtalähde: USB-latauskaapeli
- Mitat: 180 x 45 mm



1. Vaihdeettava imupää
2. Näyttö
3. Päälle/pois-painike
4. Imusäädön painike (M).

Kuusi vaihdettavaa päätä:

1. Elliptireikäinen kauneus-imupää
 - Käytetään pääasiassa pienten juonteiden poistamiseen, ihon kimmoisuuden lisäämiseen.
2. Mikrokiteinen kauneus-imupää
 - Hienot kiteet poistavat hellävaraisesti ikääntyvän ihon ja tekevät ihosta sileän ja elastisen.
3. Iso pyöreäreikäinen kosmeettinen imukuppi
 - Sitä käytetään mustapäiden imemiseen tiukasti V-kasvoista, ja sen täytyy liikkua hitaasti takaisin iholla. Älä käytä sitä yhdessä paikassa pitkään aikaan.

4. Keskikokoinen pyöreä reikäinen kosmeettinen imupää


- Korkea imu, käytetään imemään mustapäitä, aknerasvaa liikaa. Käytä alhaalta ylös vetämällä, hitaasti leuasta ylöspäin. Älä käytä sitä yhdessä paikassa pitkään aikaan.

5. Pieni pyöreä reikä kauneus imupää

- Pieni imu, käytetään mustapäiden imemiseen ohuelle ja herkälle iholle.

6. Pieni pyöreä reikäinen kauneus-imupää

- Vähemmän imukykyä herkälle iholle tai mustapäille.

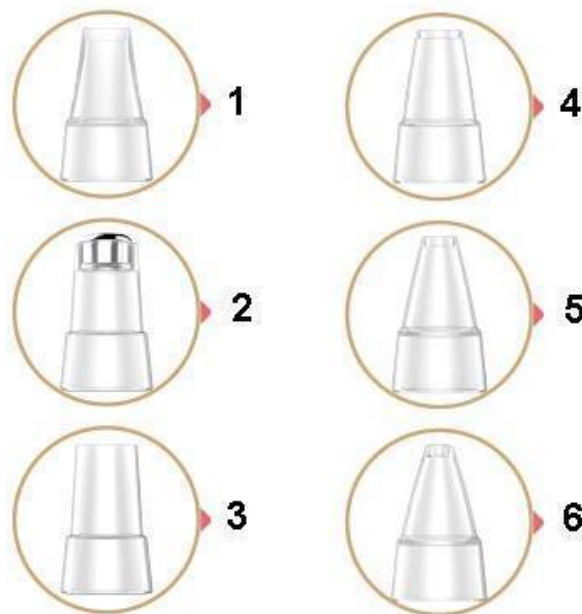

Käyttövaiheet:

1. Käytä ennen käyttöä käytä kuumaa pyyhettä, tai muuta lämpimää ja kosteuttavaa huokosten avaamiseen ja käytä sitten uudelleen
2. Asenna imupää koneeseen
3. Käynnistä painamalla kytkinpainiketta ja valitse sitten imuvoima painamalla M-painiketta. Painikkeiden oletusasetuksena on keski (ZX - neutraali iho), pitkä painallus (GX - rasvainen iho), lyhyt painallus (YX - kuiva iho).
4. Imupää liikkuu hitaasti iholla. Älä anna laitteen olla samalla alueella liian kauan.